


Prototipo de esterilizador UV-C para mascarillas N95

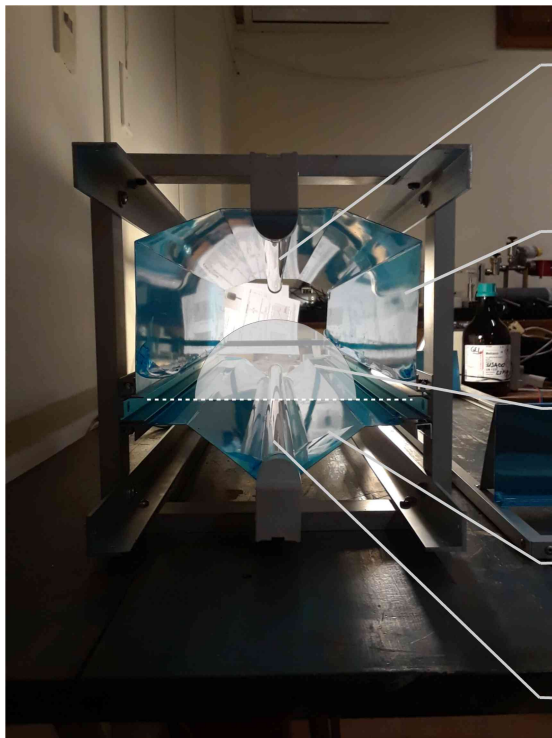

Tubo Phillips superior emisor UV-C
(12 W ópticos)

Reflector superior.
Su rol es homogeneizar la irradiación UV-C
sobre la superficie exterior de la N95.

Posición de las N95, donde recibirán una
irradiación UV-C suficientemente homogénea
sobre toda su superficie exterior e interior.


Reflector inferior.
Su rol es homogeneizar la irradiación UV-C
sobre la superficie interior de la N95.

Tubo Phillips inferior, idéntico al superior.



Marco/soporte para las N95.

Posición de las N95 en el marco/soporte.

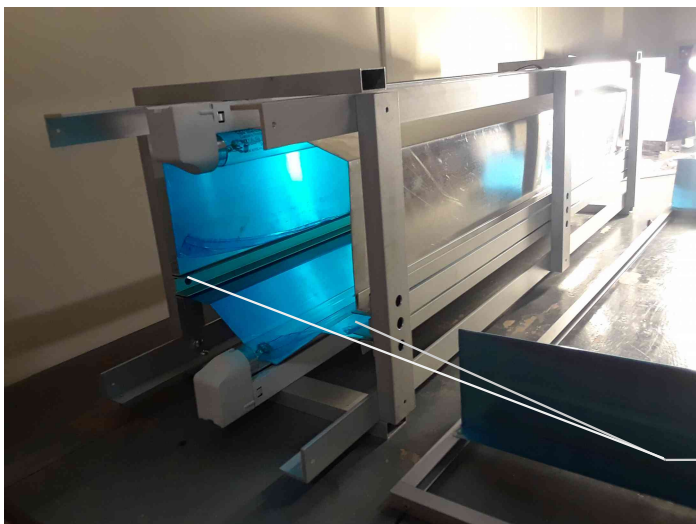

Guías para el marco/soporte de las N95